




0459

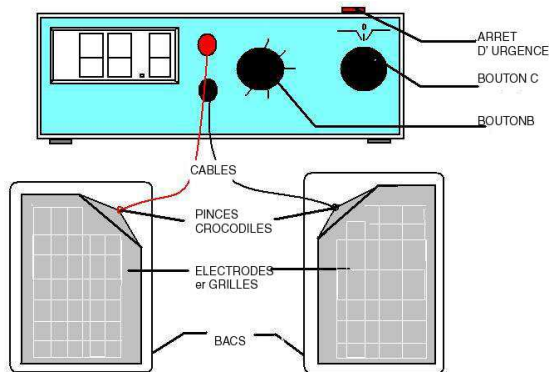

TYPE IONOMAT DATE FABRICATION
 SN : NUMERO DE SERIE CL: IIB isolation
 renforcée sans prise de terre
 PUISSANCE VA 5VA IPX1 étanche aux
 projections d'eau mais ne pas immerger.
 TENSION SECTEUR 230V
 FREQUENCE SECTEUR 50Hz
CE 0459 ORGANISME NOTIFIE : LNE/G-MED
 Attestation de marquage CE 0460/B6/1

VOTRE APPAREIL ARRIVE, DANS LA BOITE VOUS DEVEZ TROUVER :

Le générateur, 2 bacs et deux grilles, 2 électrodes, 2 câbles avec pinces crocodile, 2 électrodes aisselle si vous les avez commandées.

TRAITEMENT DES MAINS

-disposez sur une table basse de gauche à droite 1 bac avec électrode et grille, le générateur, l'autre bac avec électrode et grille

-branchez le générateur, son petit voyant vert allume et vous lisez 00.0

-versez 1/2 litre d'eau du robinet dans chaque bac

-essayez vous confortablement sur une chaise devant la table basse

-réglez le courant à la valeur supportée par exemple 15, voir tableau des valeurs recommandées

-tournez le bouton de droite sur « iono » et tout de suite mettez les mains dans l'eau

au bout de 10 secondes, le courant monte lentement, se stabilise autour de 15, s'annule au bout de 10 minutes puis recroît lentement inversé, on lit alors -15

-enfin au bout de 20 minutes l'appareil sonne, coupe le courant, vous pouvez alors retirer les mains et remettre à 0 le bouton de droite pour arrêter la sonnerie.

A tout moment en appuyant avec le front sur le bouton vert sur le boîtier vous interrompez le courant, sortez les mains de l'eau et remettez le bouton de droite sur 0

TRAITEMENT DES PIEDS

Mettez les bacs sur le sol, puis les pieds dans l'eau réglez le courant sur une valeur plus forte, par exemple 20. (voir tableau)

Puis mettez le bouton de droite sur « iono », le courant croîtra doucement et le cycle se fera tout seul

TRAITEMENT DES AISSELLES

Branchez les pinces crocodile sur le petit côté des électrodes spéciales, enfiler les dans les éponges mouillées abondamment et faites les tenir sous les bras

Mettez le bouton de droite sur « iono » et augmenter progressivement pour lire 3 à 6 sur l'affichage, un courant plus grand peut donner de petites brûlures qui guérissent spontanément

ATTENTION : VOUS NE LIREZ CE COURANT QUE SI LES PIEDS OU MAINS SONT DANS L'EAU

ATTENTION : IL EST TRES DESAGEABLE DE RETIRER LES MAINS OU PIEDS de l'eau quand le courant passe utiliser toujours l'arrêt d'urgence.

	ENFANTS	FEMMES	HOMMES
MAINS	2 à 8 mA	8 à 22 mA	10 à 25 mA
PIEDS	5 à 10 mA	10 à 25 mA	12 à 25 mA

Remarque: si les pieds ou les mains démangent trop baissez le courant et faites 2 séances par semaine, le résultat sera identique.

Entretien : sécher les électrodes et les bacs,

>Désinfecter toutes les 10 séances les bacs et les grilles et les tôles avec de l'eau de Javel diluée, ou mieux d'une solution désinfectante professionnels.

>Essuyer soigneusement les électrodes, rénover au graton à vaisselle vert tous les mois chaque électrode afin qu'elle reste brillante, ne pas mettre les câbles dans l'eau ou un produit désinfectant.

FREQUENCE DES SEANCES :

En traitement d'attaque 2 à 3 séances la première semaine, ensuite 2 séances par semaine pendant 4 semaines et 1 séance d'entretien par semaine. Le conseil du spécialiste : si mains trop sèches ou trop rouges ; diminuez le courant et réhydratez avec une application de crème hydratante.

CONTRE INDICATIONS :

Les contre-indications retenues par principe de précaution sont la grossesse, les pacemakers et les prothèses: protéger les blessures avec de la vaseline, enlever les bagues.

MODE D'EMPLOI : TRAITEMENT DES VERRUES

>Ajouter du salicylate de sodium dans l'eau du côté verrue main ou pied, (une cuillère à soupe) sur l'électrode rouge, mettre l'autre main ou pied dans de l'eau ordinaire, utiliser la position VERRUE du commutateur C.